

Prélèvement sanguin

ETAPE 01

Préparation du patient

Conditions particulières

Afin de garantir des conditions optimales, il faut observer les conditions particulières comme :

Le jeun (12 heures sans manger)

Prise/arrêt de certains médicaments

Respect d'un régime alimentaire particulier

Eviter l'ingestion d'alcool

Prélèvement en position couchée/repos

ETAPE 02

Identité du patient

Contrôler l'identité du patient

Demander confirmation au patient

L'identité du patient est une nécessité absolue. Son contrôle doit se faire **avant** le prélèvement.

ETAPE 03

Identification de l'échantillon

Les tubes ou contenants doivent être correctement identifiés.

Les tubes/matériel qui ne sont pas clairement identifiés ne seront pas traités.

Nom

Prénom

Date de naissance complète



ETAPE 04

Prise de sang



1. Vérifier l'état des veines ;
2. Appliquer le garrot en dessus du site de ponction ;
3. Désinfecter le champ de ponction. Après 30-60 secondes, essuyez le désinfectant à l'aide d'un coton sec ;
4. Avertir le patient de l'imminence de la piqûre et ponctionner la veine ;
5. Desserrer le garrot dès l'arrivée du sang, pose de garrot ne dépassant pas 1min ;
6. Effectuer la prise de sang en respectant l'ordre de prélèvement ;
7. Le mélange soigneux des tubes (avec anticoagulant) permet d'éviter la formation de caillots sanguins.

La prise de sang doit toujours être réalisée dans un bras sans perfusion. Le prélèvement doit s'effectuer dans des conditions d'hygiène irréprochables :

- Port d'une blouse propre ;
- Désinfection des mains et des surfaces en contacts ;
- Port de gants.


ETAPE 05

Ordre de prélèvement des tubes

Tubes prise de sang Sarstedt Europe.

A respecter dans la mesure du possible.

Exception : Ne jamais prélever le tube de coagulation en 1^{re} position. Si la demande ne contient que de la coagulation, il est recommandé de prélever un autre tube avant le tube vert.

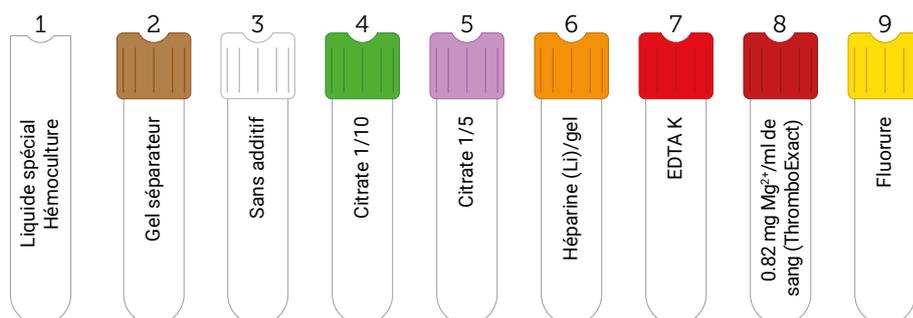

→ Les échantillons doivent être apportés au laboratoire aussi rapidement que possible.